

Führerschein-Sehtestgerät FT-2


- Robust und langlebig.
- Das ideale Gerät für den Straßenverkehrs-Sehtest nach DIN 58220, Teil 6.
- besonders leichte Bedienung
- Nie mehr Lampenwechsel durch moderne LED Beleuchtung.
- Integrierter Akku für bis zu 75 Stunden mobilen, netzunabhängigen Betrieb.
- Standard-Farbkombination: Weißaluminium / Taubenblau
Die Seitenteile sind optional in anderen RAL-Farben erhältlich.
- Lieferumfang: - Grundgerät mit Testscheibe und integriertem Akku
- Staubschutzhaube
- Netzteil
- Leitkarte
- Testformulare
- Elektrik 12 V / 1,5 VA
- Maße (mm) 268 (B) x 297 (T) x 507 (H)



In den praktischen Ablagefächern haben Sie Leitkarte und Schreibgerät immer griffbereit.



Der Ladezustand des Akkus wird von einer LED angezeigt.

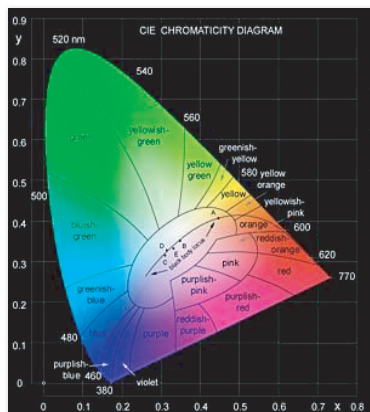

Das bon FT-2 arbeitet mit aufwendig ausgesuchten und farblich selektierten weißen Lumineszenzdioden (LED) der neuesten Generation. Diese Innovation bietet viele Vorteile gegenüber Beleuchtung mit herkömmlichen Leuchtmitteln:

- garantierte Betriebsdauer von 100.000 Stunden
- konstante Helligkeit und Farbreinheit über die gesamte Betriebsdauer
- geringere Wartungskosten, da kein Wechsel des Leuchtmittels nötig wird
- äußerst geringe Wärmeentwicklung
- keine mechanischen Empfindlichkeiten

Straßenverkehrsbezogener Sehtest nach DIN 58220-T6


Test 1
R

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0




Test 2
L

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

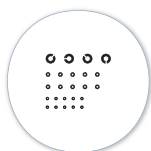

Test 3
BIN


Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

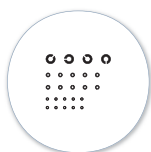

Wiederholung mit neuer Orientierung der Landoltringe


Test 10
R

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

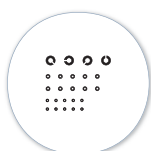


Test 11
L

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

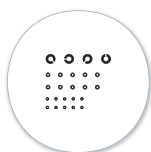

Test 12
BIN

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

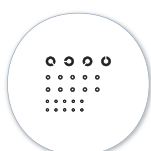

Zusätzliche Sehteste

Sehgleichgewicht

Test 4



Phorieprüfung horizontal

Test 5



Phorieprüfung vertikal


Test 6



Stereosehen Stereogrenzwinkel

Test 7

400"
200"
100"
60"

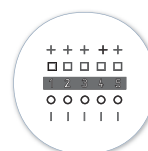

Blendempfindlichkeit

Test 8
BIN

Visus 0,25 / 0,5
Visus 0,8 / 1,0



Visusprüfung mit Ziffern

Test 9
BIN

Visus 0,5
Visus 0,63
Visus 0,8
Visus 1,0
Visus 1,25

